

Immer gut versorgt

Management von akuten
und chronischen Wunden



INHALT

Klassische Wundversorgung

Wundauflagen		Fixierverbände	
Askina® Mullkompressen	4	Askina® Finger Bob®	10
Askina® Pad	5	Askina® Elast	11
Askina® Pad S	5	Askina® Elast fine	12
Askina® Verbandmull	6	Askina® Haft Color	13
		Askina® kohäsive Fixierbinde	14
Mull- und Zellstoffprodukte		Kompressionsverbände	
Askina® Brauncel®	7	Askina® Forte	15
Askina® Cel	7	Askina® Ideal	16
Askina® Schlinggazetupfer	8		
Wundverbände		Fixierpflaster	
Askina® Soft steril	9	Askina® Fix	17
		Askina® Soft I.V.	17
		Askina® Soft Clear I.V.	18



Bei der Behandlung von chronischen und akuten Wunden kommt eine Vielzahl von Produkten zum Einsatz. Besonders chronische Wunden und Wundheilungsstörungen sind eine große Herausforderung für die Behandler*innen und mit einem hohen Aufwand verbunden. Mit dem umfassenden Sortiment von B. Braun zur Wundversorgung kann jede Wundsituation therapiegerecht behandelt werden.

Für die Behandlung chirurgischer, akuter und chronischer Wunden bieten wir moderne und an der jeweiligen Indikation orientierte Versorgungsmöglichkeiten an. Ein vielfältiges Sortiment an Verbandstoffen für die Wundabdeckung steht ebenso zur Verfügung wie Produkte speziell zur Versorgung chronischer Wunden. Das ausgereifte Produktprogramm kann somit helfen den natürlichen Heilungsprozess individuell und phasengerecht zu unterstützen.

Versorgung chronischer Wunden

Wundspülung und Wundreinigung		Silberhaltige Verbände	
Prontosan® Wundspüllösung	21	Askina® Calgitrol® Ag+	38
Prontosan® Wound Gel	23	Askina® Calgitrol® Paste	38
Prontosan® Wound Gel X	23	Alginate	
Prontosan® Wound Spray	25	Askina® Sorb Wundauflage	40
Prontosan® Debridement Pad	26	Askina® Sorb Wundtamponade	40
Silikon-Wundauflagen		Ergänzungssortiment	
Askina® DresSil	30	Askina® Carbosorb	42
Askina® DresSil Border	30	Askina® Derm Lite	43
Askina® DresSil Border Lite	31	Askina® Barrier Film	43
Askina® DresSil Heel	31	Askina® Barrier Cream	44
Askina® DresSil Border Mini	32	Askina® Barrier Swabs	44
Askina® DresSil Sacrum	32	Askina® Skin Freeze	45
Askina® SilNet Plus	33		
Schaumstoff-Wundauflagen			
Askina® Foam	34		
Askina® Trachea	34		
Askina® Heel	35		

Grundvoraussetzung zur Wundheilung

akuter und chronischer Wunden

Behandlung der Grunderkrankung
(Gefäß-Sanierung, Druckentlastung, Diabetes mellitus)

Wundbehandlung

- OPTIMALE WUNDREINIGUNG BEI JEDEM VERBANDWECHSEL
- Wundantiseptik bei infizierten Wunden (zeitlich befristet)
- Phasengerechte Auswahl der Wundauflage

Wundreinigung

- Entfernung von Fremdkörpern, Zelltrümmern, Mikroorganismen, Blut und Eiweiß (bilden Biofilme)
- Lösen und Entfernen von Biofilmen
- Neubildung von Biofilmen vermeiden
- Wundbettpräparation zur Förderung der Wundheilung

Klassische Wundversorgung

Wundauflagen



Askina® Mullkompressen
Mullkompressen aus Verbandmull mit eingeschlagenen Schnittkanten

Ausführung		Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
8-fach gelegt	Rezeptur-Packung – steril	5 x 5 cm	5 x 2 Stk.	9031103N		1778902
		7,5 x 7,5 cm	5 x 2 Stk.	9031111N		1778919
		10 x 10 cm	5 x 2 Stk.	9031120N		1778925
		10 x 20 cm	5 x 2 Stk.	9031138N	52000/036	1778931
	Sprechstunden-Packg. – steril	5 x 5 cm	25 x 2 Stk.	9031200N	52000/015	1778948
		7,5 x 7,5 cm	25 x 2 Stk.	9031219N	52000/023	1778954
		10 x 10 cm	25 x 2 Stk.	9031227N	52000/032	1778960
		10 x 20 cm	25 x 2 Stk.	9031235N	52000/035	1778977
	Sprechstunden-Packg. – unsteril	5 x 5 cm	100 Stk.	9031308	52005/015	1778983
		7,5 x 7,5 cm	100 Stk.	9031316	52005/020	1779008
		10 x 10 cm	100 Stk.	9031324	52005/027	1779014
		7,5 x 7,5 cm	100 Stk.	9033017	52006/019	1779037
12-fach gelegt	Sprechstunden-Packg. – unsteril	10 x 10 cm	100 Stk.	9033025	52006/024	1779043
		10 x 20 cm	100 Stk.	9033041	52006/030	1779072



Askina® Pad
Weiche und sehr saugfähige, sterile Wundauflage zur Versorgung von Hautwunden aller Art

Ausführung		Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
		5 x 5 cm	100 Stück	WIN9024018	1777297
		10 x 10 cm	100 Stück	WIN9024034	1777311
		10 x 20 cm	100 Stück	WIN9024042	1777328



Askina® Pad S
Gebrauchsfertige, sterile Schlitzkomresse mit Lochstanzung zur Wundversorgung von Kathetern sowie Draht- und Nagelextensionen

Als Verbandmittel (patientenindividuell) verordnungs- und erstattungsfähig

Ausführung		Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
		5 x 5 cm	100 Stück	WIN9024050	3091397
		10 x 10 cm	100 Stück	WIN9024010	5750504

Klassische Wundversorgung

Wundauflagen



Askina® Verbandmull
Verbandmull in zwei Varianten nach DIN 61630 – VM 20

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
Rollenpackung in Klarsichtdispenser	2 m	1 Rolle	9030026W	
	5 m	1 Rolle	9030050W	5750504
	10 m	1 Rolle	9030107W	1779445

Klassische Wundversorgung

Mull- und Zellstoffprodukte



Askina® Brauncel®
Zellstofftupfer von der Rolle aus hochgebleichtem Verbandzellstoff nach DAB, DIN 19310

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
Askina® Brauncel®	à 500 Tupfer	1 Rolle	9051015	4523094
Askina® Brauncel®-Box	–	1 Stück	9051503P	1779250



Askina® Cel
Stark saugfähiger Verbandzellstoff

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
hochgebleicht	Rolle, 36 cm breit, 1000 g	1 Rolle	9050418	1779505
	in Lagen, 37 x 57 cm, 15 kg	1 Karton	9050035	1779511
ungebleicht	in Lagen, 37 x 57 cm, 15 kg	1 Karton	9050523	1779528

Klassische Wundversorgung

Mull- und Zellstoffprodukte



Askina® Schlinggazetupfer
Schlinggazetupfer zur Wundversorgung

- Aus Verbandmull nach DIN 61630 – VM 20, Ph. Eur., 20-fädig
- Ohne Röntgenkontrastfaden
- In unterschiedlichen Größen und steriler / unsteriler Version
- Zur Hautreinigung, vor Injektionen; Blutstillung; Hautdesinfektion
- Aus 100% Baumwolle

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
pflaumengroß, steril	Packg. zu 4 Stk.	20 Packg.	9016007	1779267
pflaumengroß, steril	Packg. zu 20 Stk.	16 Packg.	9016015	1779273
pflaumengroß, unsteril	Packg. zu 2 x 500 Stk.	1 Packg.	9016023	1779296
walnussgroß, unsteril	Packg. zu 2 x 1000 Stk.	1 Packg.	9016120	1779304

Klassische Wundversorgung

Wundverbände



Askina® Soft steril
Gebrauchsfertiger, hautfreundlicher Vliesstoffwundverband für die postoperative Primär- und Folgeversorgung sezernierender Wunden nach Unfallverletzungen, chirurgischen Eingriffen oder einfach als sanfte Wundabdeckung

- Elastischer Wundverband aus atmungsaktivem Vliesstoff, passt sich den Körperkonturen an
- Nichthaftende Askina® Pad-Wundauflage ermöglicht schmerzarmen Verbandwechsel und eine extrem hohe Saugfähigkeit
- Sichere Fixierung durch hautfreundlichen Acrylatkleber

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
	7,5 x 5 cm	50 Stück	WIN9086480	
	9 x 5 cm	50 Stück	WIN9086501	1779534
	9 x 10 cm	50 Stück	WIN9086510	1779540
	9 x 15 cm	40 Stück	WIN9086528	1779557
	9 x 20 cm	30 Stück	WIN9086536	1779563

Klassische Wundversorgung

Fixierverbände



Askina® Finger Bob®
Die innovative Wirkstruktur und Anwendungstechnik sorgt in Sekundenschnelle für eine sichere Fixierung des Verbandes am Finger.

- In Sekunden applizierbarer Verband
- Für jede Fingergröße und -stärke geeignet
- Zur sicheren Fixierung von Wundauflagen
- Patentierte
- Weiß oder farbig (rot, blau, pink, rosa, orange, grün)
- Material: Baumwolle-Viskose-Mischung
- Länge: 180 mm


Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
weiß	180 mm Länge	50 Stück	WIN9044000	1778121
farbig	180 mm Länge	50 Stück	WIN9044019	1778138
weiß	180 mm Länge	72 Stück	WIN9044027	06965023
farbig	180 mm Länge	6 Stück	WIN9044035	06965017



In seiner Form wird der Askina® Finger Bob® auf die Spitze des verletzten Fingers gesetzt.



Der Askina® Finger Bob® wird über den Finger abgerollt.

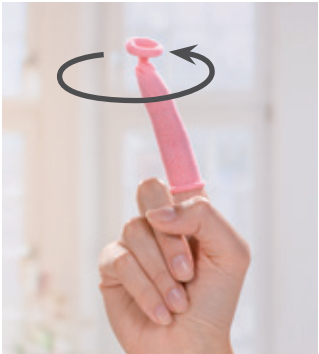

Nun wird er am oberen Ende in beliebiger Richtung eingedreht (eine Umdrehung genügt).



Jetzt nur noch das eingedrehte Ende abrollen. Fertig ist der Schnellverband.



Askina® Elast
Elastische Fixierbinde aus 70 % Viskose und 30 % Polyamid

- Dehnungsverhalten: ca. 130 % längselastisch
- Sterilisierbar im Autoklaven
- Sehr guter Tragekomfort durch hohen Naturfaseranteil
- Indikationen: Zur Fixierung von Wundauflagen und Schienen sowie für leichte Druckverbände

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
lose im Karton	4 m x 4 cm	20 Stück	9048111	1777860
	4 m x 6 cm	20 Stück	9048120	1777877
	4 m x 8 cm	20 Stück	9048138	1777883
	4 m x 10 cm	20 Stück	9048146	1777908
	4 m x 12 cm	20 Stück	9048154	1777914
	Länge gedehnt			

Klassische Wundversorgung

Fixierverbände



Askina® Elast fine
Elastische Fixierbinde aus 54 % Polyamid und 46 % Viskose

Ausführung	ABMESSUNG	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
einzeln verpackt	4 m x 4 cm	20 x 1 Stk.	9045040	52510 018	2675452
	4 m x 6 cm	20 x 1 Stk.	9045066	52510 030	2675469
	4 m x 8 cm	20 x 1 Stk.	9045082	52510 040	2675475
	4 m x 10 cm	20 x 1 Stk.	9045104	52510 050	2675481
unverpackt, lose im Karton - Sprechstundenpackung -	4 m x 4 cm	20 Stück	9046046		
	4 m x 6 cm	20 Stück	9046062		
	4 m x 8 cm	20 Stück	9046089		
	4 m x 10 cm	20 Stück	9046100		
	4 m x 12 cm	20 Stück	9046127		
unverpackt, lose im Karton	4 m x 6 cm	100 Stück	9047069		
	4 m x 8 cm	100 Stück	9047085		
	4 m x 10 cm	50 Stück	9047107		
	Länge gedehnt				



Askina® Haft Color
Farbige kohäsive Fixierbinde in fünf leuchtenden Farben

- Dehnungsverhalten: ca. 75 % längselastisch
- Indikationen: Universell einsetzbare Fixierbinde, leichte Stützverbände sowie zum Anwickeln von Schienen
- Material: 40 % Baumwolle, 60 % Polyamid

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
blau	6 cm x 20 m	1 Stück	9058203	52515/051	1778061
	8 cm x 20 m	1 Stück	9058214	52515/066	1778078
	8 cm x 4 m	1 Stück	9058419		9058419
pink	6 cm x 20 m	1 Stück	9058222	52515/053	1778084
	8 cm x 20 m	1 Stück	9058230	52515/068	1778090
gelb	6 cm x 20 m	1 Stück	9058249	52515/052	1778109
	8 cm x 20 m	1 Stück	9058257	52515/067	1778115
	8 cm x 4 m	1 Stück	9058613		
grün	8 cm x 4 m	1 Stück	9058311		
10 Rollen in 5 verschiedenen Farben	8 cm x 4 m	10 Stück	9058915		
	Länge gedehnt				

Klassische Wundversorgung

Fixierverbände



Askina® kohäsive Fixierbinde
Selbsthaftende elastische Fixierbinde

- Dehnungsverhalten: ca. 100 % längselastisch
- Sterilisierbar im Autoklaven
- Für Verbände, die besonders stark beansprucht werden, z. B. an Gelenken
- Material: 40 % Baumwolle, 30 % Viskose, 30 % Polyamid
- Mit mikropunktueller Lateximprägnierung

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
	4 m x 6 cm	1 Stück	9058028		
	20 m x 6 cm	1 Stück	9058125	52515/048	1778026
	20 m x 8 cm	1 Stück	9058133	52515/060	1778032
	20 m x 10 cm	1 Stück	9058141	52515/074	1778049
	Länge gedehnt				

Klassische Wundversorgung

Kompressionsverbände



Askina® Forte
Elastische, kohäsive Kurzzugbinde

- Dehnungsverhalten: ca. 50 % längselastisch
- Indikationen: Kompressionsverbände bei venösen und lymphatischen Erkrankungen, Stütz- und Entlastungsverbände sowie für Verbände mit hohem Arbeitsdruck und niedrigem Ruhedruck
- Material: 69 % Baumwolle, 31 % Viskose; mit mikropunktueller Natur-Latex-Beschichtung
- Hautfarben
- Sterilisierbar
- Luftdurchlässig
- Haftet nur an sich selbst, nicht auf Haut oder Haaren

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
	10 cm x 4,5 m	10 Stück	9057021	1778463
	Länge gedehnt			

Klassische Wundversorgung

Kompressionsverbände



- Askina® Ideal
Kompressionsbinde aus 100 % Baumwolle
- Textilelastisch
 - Dehnungsverhalten: ca. 90 % längselastisch
 - Kein Ausfransen durch Schlingkante
 - Für Kompressionsverbände, Stütz- und Entlastungsverbände und zum Anwickeln von Schienen
 - Material: 40 % Baumwolle, 30 % Viskose, 30 % Polyamid
 - Mit mikropunktueller Lateximprägnierung

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
einzeln verpackt, mit Verbandklammern	5 m x 4 cm	10 Stück	9041044	2675506
	5 m x 6 cm	10 Stück	9041060	2675512
	5 m x 8 cm	10 Stück	9041087	2675529
	5 m x 10 cm	10 Stück	9041109	2675535
	5 m x 12 cm	10 Stück	9041125	2675541
	5 m x 15 cm	1 Stück	9041150	
	5 m x 20 cm	1 Stück	9041206	2675564
Sprechstundenpackung, unverpackt, lose im Karton, ohne Verbandklammern	5 m x 30 cm	1 Stück	9041303	2675570
	5 m x 6 cm	10 Stück	9041508	06874964
	5 m x 8 cm	10 Stück	9041516	06874970
	5 m x 10 cm	10 Stück	9041524	06874987
	5 m x 12 cm	10 Stück	9041532	06874993
	Länge gedehnt			

Klassische Wundversorgung

Fixierpflaster



- Askina® Fix
Selbstklebendes, atmungsaktives Vlies
- Hohe Formadaption und Elastizität
 - Ohne Bewegungseinschränkung können Gelenke verbunden werden
 - Leichte Fixierung durch geteilte Schutzfolie
 - Fixierung von Wundverbänden, Gaze- und Saugkompressen, z. B. Askina® Pad, Askina® Carbosorb
 - Fixierung von Kathetern und Kanülen

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
	10 m x 5 cm	1 Rolle	9083014	52615/036	1778262
	10 m x 10 cm	1 Rolle	9073022	52615/037	1778279
	10 m x 15 cm	1 Rolle	9073030	52615/038	1778285
	10 m x 20 cm	1 Rolle	9073049	52615/039	1778291



- Askina® Soft I.V.
Ermöglicht eine leichte und sichere Fixierung von Venenverweilkanülen
- Hoher Tragekomfort durch elastisches Vliesmaterial
 - Infektionsschutz durch saugfähige Komresse
 - Kein Verkleben mit der Punktionsstelle
 - Hypoallergener Kleber mit zuverlässiger Klebkraft
 - Extra-Tupfer zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
	8 x 6 cm	50 Stück	WIN9086919	1779600

Klassische Wundversorgung

Fixierpflaster



- Askina® Soft Clear I.V.
Ermöglicht eine leichte und sichere Fixierung von Venenverweilkanülen
- Transparent, ermöglicht den Blick auf die Einstichstelle
 - Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
 - Sanfte Entfernung des Pflasters
 - Hoher Infektionsschutz durch die transparente Trägerfolie
 - Einfach anzuwenden
 - Stark saugfähiges Insel-Pad
 - Extra-Tupfer zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers
 - Hypoallergener Kleber mit zuverlässiger Klebkraft
 - Abgerundete Ecken verhindern ein Aufrollen des Verbandes

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
	8 x 6 cm	50 Stück	WIN9086893	4325561

Wundspüllösung und Wundreinigung



Für die natürliche Wundheilung ist die Reinigung von Wundoberflächen, Wundrändern und Umgebungen essenziell – denn nur eine saubere Wunde kann heilen. Bei Verunreinigungen, wie Wundbelägen und Biofilm, kann die Mikrozirkulation gestört werden, die wiederum die Bildung von Granulationsgewebe verhindert.

Um diese Begünstigung von Biofilmen und der anhaltenden Wundheilungsstörung entgegenzuwirken, entwickelte B. Braun Prontosan® als die Lösung zur Spülung und Reinigung von Wunden.

Prontosan®

Effektivität – wissenschaftlich und praktisch belegt

WISSENSCHAFTLICHE DATENLAGE UND PRAKTISCHE ERFAHRUNG

Die einzigartige Kombination von Betain und Polihexanid in Prontosan® hat einen bewiesenen doppelten Effekt auf die optimale Wundbettkonditionierung.



Betain
Betain ist ein besonders verträgliches, effektives Tensid, das den Biofilm aufricht, Wundbeläge löst und somit die Belastung der Wundoberfläche durch Bakterien und Zelltrümmer verringert.

Polihexanid (PHMB)
PHMB ist eine wirksame und hervorragend verträgliche Substanz, die das Wachstum der Mikroorganismen hemmt und den Belag (Bioburden) reduziert. PHMB zeichnet sich durch seine unspezifisch elektrostatische Interaktion mit den Zellwänden der Bakterien aus. Dies führt zu der hohen Verträglichkeit ohne Resistenzbildung. Die Wundheilung wird gefördert und beschleunigt.



Prontosan® Wundspüllösung entfernt Wundbeläge durch die synergistische Wirkung des Betain-Tensids und dem Inhaltsstoff Polihexanid. Prontosan® Wound Gel X befeuchtet und reinigt die Wundoberfläche während der Verbandliegezeit und fördert ein physiologisches Wundheilungsmilieu.

- Reinigt effektiv durch gleichmäßige Benetzung mit Betain-Tensid
- Haftet sicher auf großen Wundflächen (Prontosan® Wound Gel X)
- Schützt vor bakterieller Besiedelung
- Schmerzarm bei der Applikation



Versorgung chronischer Wunden Wundspülung und Wundreinigung

WUNDSPÜLUNG UND WUNDREINIGUNG AUF EINEN BLICK											
	Chronische Wunden	Akute Wunden	Verbrennungen Grad III	Verbrennungen bis Grad II b	Thermische Wunden	Chirurgische Wunden	Reiz- und schmerzlose Anwendung	Haut- und schleimhautverträglich	Polihexanid	Lösen von Wundbelägen (Nekrosen, Fibrin, Biofilm)	Verhindert die Bildung von Biofilm
Prontosan® Spüllösung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prontosan® Wound Gel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prontosan® Wound Gel X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prontosan® Spray	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Neu seit MDR-Zertifizierung




Prontosan® Wundspüllösung
Sterile, gebrauchsfertige Lösung für die Reinigung, Spülung und Befeuchtung von akuten, chronischen und infizierten Hautwunden sowie Verbrennungen

- Lösen von Wundbelägen (Nekrosen, Fibrin, Biofilm)
- Intraoperative Reinigung und Spülung von Wunden
- Lösen verkrusteter Wundauflagen und Verbände vor deren Entfernen
- Verhindert Bildung von Biofilm
- Schaffung eines heilungsfördernden Milieus
- Für wiederholten und langfristigen Gebrauch
- Dermatologische Unbedenklichkeit
- Kompatibel mit allen B. Braun-Verbandsstoffen
- 8 Wochen Haltbarkeit nach Anbruch


Ausführung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
40 ml, Patronenflasche im Riegel	24 Stück	400487	52232/039	4276124
350 ml, Spritzflasche	1 Stück	400403	52232/012	2652758
1000 ml, Spritzflasche mit Aufhänger im Boden für V.A.C. Ulta (KCI)	1 Stück	400446	52232/046	4751370
Inhaltsstoffe: 0,1% Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexanid), Undecylenamidopropyl Betain, gereinigtes Wasser				

NEUER PRAKTSCHER VERSCHLUSS


VORTEILE: Patentierter und sicherer Verschluss | Einfach und schnell zum Öffnen | Auslaufsicher | Sofort ersichtlich, ob die Flasche bereits geöffnet wurde

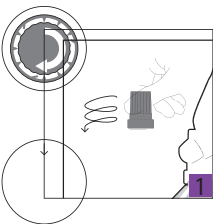


Kappe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, dadurch wird der Öffnungsbereich der Flasche durchstochen

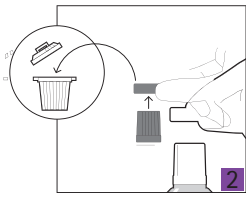

Sicherheitsring von der Kappe entfernen (kann entsorgt werden)

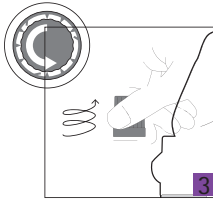

Kappe öffnen

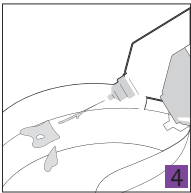

Flasche ist einsatzbereit



IM VIDEO FINDEN SIE WEITERE INFORMATIONEN

TIPPS UND TRICKS:

- Auf Körpertemperatur anwärmen (z. B. im Babyflaschenwärmer)
- Gazekompressen für die Nass-Trocken-Phase ausreichend befeuchtet auf und über den Wundrand legen
- Kompatibel mit den führenden, handelsüblichen Wundauflagen (Ausnahme: Maden)
- Auch bei infizierten Wunden geeignet



Prontosan® Wound Gel
Hydrogel für die Reinigung, Befeuchtung und Dekontamination von akuten, chronischen und infizierten Hautwunden und Verbrennungen, fließfähige Konsistenz für Wundcavitäten

- Lösen von Wundbelägen (Nekrosen, Fibrin, Biofilm)
- Verhinderung der Bildung von Wundbelägen
- Geeignet für Wundkavität durch gutes Fließverhalten
- Schmerzarme Anwendung
- Schaffung eines heilungsfördernden Milieus
- Für wiederholten und langfristigen Gebrauch
- 8 Wochen Haltbarkeit nach Anbruch

Ausführung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
30 ml Patronenflasche	1 Stück	400505	51001/001	3035743
Inhaltsstoffe: 0,1 % Polyaminopropyl Biguanid (Polihexanid), Betain-Tensid, Glycerol, Hydroxyethylcellulose, gereinigtes Wasser				



Prontosan® Wound Gel X
Hydrogel für die Reinigung, Befeuchtung und Dekontamination von akuten, chronischen und infizierten Hautwunden und Verbrennungen, festere Konsistenz für die Applikation auf flächigen Wunden



- Lösen von Wundbelägen (Nekrosen, Fibrin, Biofilm)
- Verhinderung der Bildung von Wundbelägen
- Gutes Haftungsverhalten auf flächigen Wunden (inkl. schwergradigen Verbrennungen)
- Schmerzarme Anwendung
- Schaffung eines heilungsfördernden Milieus
- Für wiederholten und langfristigen Gebrauch
- 8 Wochen Haltbarkeit nach Anbruch

Ausführung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
50 g Tube	1 Stück	400517		4241120
250 g Tube	1 Stück	400508	51001/014	3856138
Inhaltsstoffe: 0,1 % Polyaminopropyl Biguanid (Polihexanid), Betain-Tensid, Glycerol, Hydroxyethylcellulose, gereinigtes Wasser				



TIPPS UND TRICKS

- Kompatibel mit den führenden, handelsüblichen Wundauflagen (Ausnahme: Maden)
- Den Deckel von Prontosan® Wound Gel vor der ersten Anwendung fest zuschrauben. Der Dorn im Deckel öffnet die Ampulle.
- Prontosan® Wound Gel in tiefe Wunden fließen lassen, Wunde druckfrei tamponieren (z.B. mit einem Alginat).
- Prontosan® Wound Gel X mit einem Spatel auf oberflächliche Wunden auftragen.

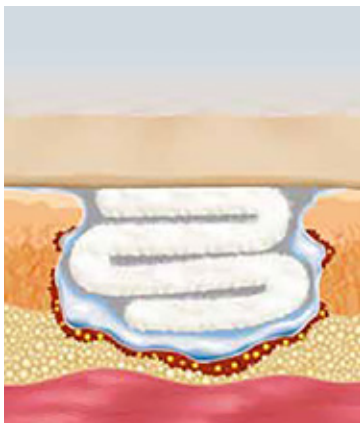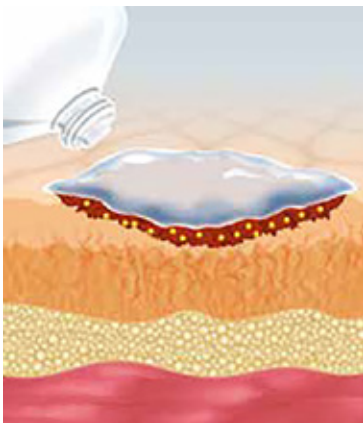

Anwendung
Die Wahl zwischen Prontosan® Wound Gel und Prontosan® Wound Gel X ermöglicht die optimale Versorgung von kleineren und tieferen Wundkavitäten sowie von großflächigen Wunden.
① Bei flachen, großflächigen Wunden Prontosan® Wound Gel X in einer 3 – 4 mm dicken Schicht auftragen und mit einem Sekundärverband abdecken.
② Für die Anwendung in tiefen Wundhöhlen oder -taschen werden die verkrusteten Wundbeläge mit einer mindestens 3–5 mm dicken Schicht Prontosan® Wound Gel bedeckt. Anschließend wird die Wunde druckfrei tamponiert und mit einem Sekundärverband verschlossen.

Versorgung chronischer Wunden

Wundspülung und Wundreinigung



Prontosan® Wound Spray
Gebrauchsfertige Lösung für die Reinigung und Befeuchtung von akuten, chronischen und infizierten Hautwunden sowie Verbrennungen mit Sprühapplikation

- Beugt Wundinfektionen und Biofilm vor
- Schützt vor multiresistenten Erregern (MRSA, VRE, ESBL)
- Löst Wundbeläge (Nekrosen, Fibrin, Biofilm)
- Lösen verkrusteter Wundauflagen und Verbände vor deren Entfernen
- Schmerzarme Anwendung, hautverträglich
- Schaffung eines heilungsfördernden Milieus
- Gute Verträglichkeit mit Katheter- und Sondenmaterialien1
- 12 Monate Haltbarkeit nach Anbruch

Ausführung	VE	Art.-Nr.	PZN
75 ml Sprühflasche	20 Stück	400565	4239347
Zusammensetzung: 0,1 % Polyaminopropyl Biguanid (Polyhexanid), Betain-Tensid, Glycerol, Hydroxyethylcellulose, gereinigtes Wasser			

Prontosan® Debridement Pad

Die neueste Ergänzung in der Prontosan® Produktfamilie



Prontosan® Debridement Pad wurde als mechanisch unterstützende Erweiterung des Prontosan® Wundreinigungs-Portfolios entwickelt. Das Pad besteht aus einer reinigenden Mikrofaserseite und einer darüber liegenden absorbierenden Schicht. Die Mikrofaser entfernt Wundbeläge, Keime und Biofilm, während das dabei aufgenommene überschüssige Wundexsudat in der Außenseite absorbiert wird.

Bei ausreichender Einweichphase erzielt das Prontosan® Debridement Pad sogar bei schwerwiegenden Verkrustungen und nekrotischen Belägen gute Erfolge. Dazu eignet sich Prontosan® Wundspüllösung oder Prontosan® Wound Gel in besonderem Maße.



Prontosan® Debridement Pad


Effektive und sanfte Wundreinigung, mechanisch unterstützende Komponente des Prontosan® Wundreinigungs-Systems zur Entfernung von Wundbelägen, Debris und überschüssigem Exsudat

- Effektive Reinigungsleistung durch Mikrofaser-Technologie
- Sanft und gewebeschonend
- Besondere Form für schwer zugängliche Wundbereiche
- Blister-Verpackung ermöglicht aseptisches Tränken mit z. B. Prontosan® Wundspüllösung
- Nur zum Einmalgebrauch

Ausführung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
12 cm x 8,3 cm, tropfenförmig	3 Stück	3908456		
12 cm x 8,3 cm, tropfenförmig	10 Stück	3908457	52250 018	4872151
Zusammensetzung: Mikrofaser aus Polyester/Polypropylen, absorbierende Schicht aus Propylen. Pads sind einzeln steril verpackt.				

Funktion

Mikrofasern sind in der Lage sogar kleinste mikroskopische Partikel an sich zu binden und damit aus dem Wundbett zu entfernen. Im Gegensatz dazu sind Monofilamente sehr grobe Strukturen, die Partikel nicht aufnehmen können, sondern sozusagen „wegbürsten“. Mikrofasern funktionieren über adhäsive Kräfte, die die Partikel anziehen, in ihrer Struktur aufnehmen und damit eine sanfte und gleichermaßen effektive Reinigungswirkung erzielen. Die große Anzahl der Fasern gewährleistet eine hohe Aufnahmekapazität.

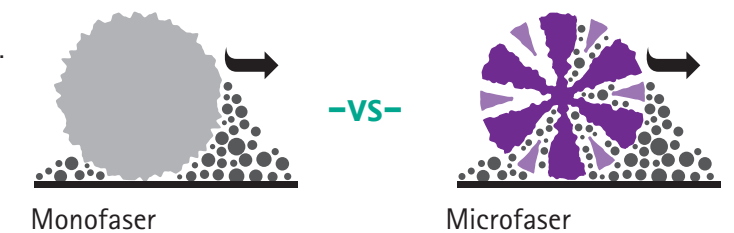

Anwendung

Die unbedruckte Seite des Reinigungspads sollte mit 15 - 20 ml Prontosan® befeuchtet werden*. Dies kann in der Blisterverpackung erfolgen.

Anschließend mit dieser befeuchteten Seite die Wundoberfläche mit leichtem Druck in zirkulären Bewegungen reinigen. Nach diesem Reinigungsvorgang empfiehlt es sich, erneut mit Prontosan® Wundspüllösung zu spülen*, um restliche, gelöste Beläge abzuspielen.

Es ist darauf zu achten, dass das Pad gemäß der Non-Touch-Technik nur seitlich am Rand und an der bedruckten Rückseite angefasst wird. Die Wunde darf nicht mit den Händen berührt werden.



Die breite Seite des Pads sollte zur großflächigen Reinigung eingesetzt werden.

Mit der spitzen Seite lassen sich schmale Wundbereiche sowie kleine Taschen z.B. unter dem Wundrand reinigen.

* Falls kein Prontosan® zum Tränken des Pads verfügbar ist, kann jede geeignete Wundspüllösung verwendet werden.

Wundauflagen



In dem vielfältigen Askina® Portfolio befinden sich neben schonenden Silikon-Wundauflagen, auch saugfähige Schaumstoffe und silberhaltige Verbände gegen infizierte Wunden. So kann mit den B. Braun-Produkten jede Wundsituation therapiegerecht behandelt werden.

Askina®-Fokusprodukte auf einen Blick

	Dekubitus	Ulcus cruris	Diabetisches Fußulcus	Abschürfungen	Traumatische Wunden	Spalthautentnahmestellen	Chirurgische Wunden	Verbrennungen Grad I	Verbrennungen Grad II	Thermische Wunden		
Askina® DresSil Askina® DresSil Border Der silikonbeschichtete Schaumstoffverband	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		- Atraumatische Verbandwechsel - Hoher Tragekomfort - Kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben - Unter Kompression formstabil - Hypoallergen
Askina® Calgitrol® Paste Das Silberalginat aus der Tube	■	■	■	■	■	■	■		■	■		- Leichte und passgenaue Applikation - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Wundkonturen - Kontrollierte, gleichmäßige Abgabe von Silberionen - Wirksam gegen breites Keimspektrum (inkl. MRSA) - Einfach durch Spülen zu entfernen
Askina® Calgitrol Ag+ Silberhaltige Auflage mit verstärkten Cellu- losefasern	■	■	■	■	■	■	■	■	■			- Atraumatische Verbandwechsel - Einfaches Handling - Kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben - Hypoallergen
Askina® Foam Die saugstarke Schaumstoff-Wund- auflage bei starker Exsudation	■	■	■		■							- Hohe und schnelle Exsudataufnahme - Gutes Rückhaltevermögen - Unter Kompression formstabil
Askina® Heel Der anatomische Fersenverband	■		■				■					- Besonders anatomische Fersenform - Schutz der Sprunggelenke - Auch für Ellenbogen einsetzbar
Askina® Carbosorb Verband mit Aktiv- kohle und Superab- sorbierschicht	■	■	■		■		■	■	■			- Hohe Saugfähigkeit durch Superabsorber - Bei vorliegender Infektion - Bei der Entwicklung unangenehmer Gerüche - Bindet im Wundareal freigesetzte Toxine

 wenig nässende Wunde – wenig Exsudation

 mittel nässende Wunde – mittlere Exsudation

 stark nässende Wunde – starke Exsudation

 sehr starke Exsudation

Versorgung chronischer Wunden

Silikon-Wundauflagen



Askina® DresSil

Atmungsaktiver, hochabsorbierender und silikonbeschichteter Polyurethanschaum für ein optimales Exsudatmanagement und atraumatische Verbandwechsel

- Haftet sanft und sicher – auch über mehrere Tage
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandwechsel
- Keine Störung der Wundheilung durch Schädigung von Granulations- und Epithelgewebe
- Hinterlässt keine Verbandrückstände auf der Wunde
- Minimiert das Risiko von allergischen Reaktionen
- Unterstützt ein feuchtes Wundmilieu
- Indikationen: Dekubitus, Ulcus cruris, Diabetisches Fußulcus, traumatische Wunden, chirurgische Wunden, palliative Wunden

Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
5 x 7 cm	10 Stück	ADM5295710	51441/020	3837098
10 x 10 cm	10 Stück	ADM5291010	51441/021	3837112
15 x 15 cm	5 Stück	ADM5291505	51441/023	3837135
10 x 20 cm	10 Stück	ADM5291210	51441/022	3837158
20 x 20 cm	5 Stück	ADM5292005	51441/024	3837164



Askina® DresSil Border

Atmungsaktiver, hochabsorbierende Polyurethanschaum mit Silikon-Haftfläche und zusätzlichem umlaufenden Hafttrand (=HR*, umlaufend ca. 15mm)

- Optimales Exsudatmanagement
- Ermöglicht atraumatische Verbandwechsel
- Einfaches Handling
- Hoher Tragekomfort für den Patienten
- Kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben
- Hypoallergen
- Indikationen: Dekubitus, Ulcus cruris, Diabetisches Fußulcus, traumatische Wunden, chirurgische Wunden, palliative Wunden

Abmessung mit Heftrand	Abmessung ohne Heftrand	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	10 Stück	ADM5397510	51446/071	4276377
10 x 10 cm	7 x 7 cm	10 Stück	ADM5391010	51446/017	3858901
10 x 20 cm	7 x 17 cm	10 Stück	ADM5391210		
15 x 15 cm	12 x 12 cm	10 Stück	ADM5391510	51446/018	3858918
15 x 20 cm	12 x 17 cm	10 Stück	ADM5395210	51446/096	4276377
20 x 20 cm	17 x 17 cm	5 Stück	ADM5392005	51446/019	3858924



Askina® DresSil Border Lite

Dünnere Schaumstoffverband mit Silikonbeschichtung und Hafttrand

Abmessung	VE	Art.-Nr.
5,5 x 12 cm	10 Stück	WIN5385210
10 x 10 cm	10 Stück	WIN5381010
10 x 20 cm	10 Stück	WIN5381210



Askina® DresSil Heel

Silikonbeschichteter Schaumstoffverband mit umlaufendem Hafttrand speziell für die Ferse

- Optimal zur Versorgung von Wunden im Bereich der Ferse und zur Polsterung des Innen- und Außenknöchels
- Sichere und hautschonende Hafteigenschaften durch Silikonbeschichtung
- Einfaches und schnelles Anlegen und Entfernen
- Optimales Exsudatmanagement
- Indikationen: Dekubitus, Diabetische Fußulcera, Traumatische Wunden, Chirurgische Wunden, Hautrisse, Verbrennungen ersten und zweiten Grades

Abmessung mit Hafttrand	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
22 x 21,6 cm	5 Stück	ADM5592205	51456/015	4356107



Askina® DresSil Border Mini
Kleiner silikonbeschichteter Schaumstoffverband mit rundgeformtem Wund-Pad und umlaufendem Fixierrand ca. 15 mm

Abmessung mit Hefrand	Abmessung ohne Hefrand	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
6 x 6 cm	Ø 3 cm	10 Stück	ADM5396610	51446/070	4356099



Askina® DresSil Sacrum
Speziell für die schwer zu versorgenden Problemzonen im Sakralbereich gestaltet

- Haftet sanft und sicher – auch über mehrere Tage
- Atraumatischer und schmerzarter Verbandwechsel
- Keine Störung der Wundheilung durch Schädigung von Granulations- und Epithelgewebe
- Hinterlässt keine Verbandrückstände auf der Wunde
- Minimiert das Risiko von allergischen Reaktionen
- Unterstützt ein feuchtes Wundmilieu
- Minimiert das Mazerationsriskio der Wundumgebung
- Indikationen: Dekubitus, traumatische Wunden, chirurgische sowie palliative Wunden

Abmessung mit Hefrand	Abmessung ohne Hefrand	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
16 x 17,5 cm	13 x 14,5 cm	5 Stück	ADM5491605	51453/015	07765243



Askina® SilNet Plus
Sanft und sicher haftendes Silikon-Distanzgitter

- Atraumatischer und schmerzarter Verbandwechsel
- Keine Beschädigung von Granulations- und Epithelgewebe
- Wundauflage hinterlässt keine Rückstände
- Minimiert das Risiko von allergischen Reaktionen
- Unterstützt ein feuchtes Wundmilieu
- Minimiert das Mazerationsrisiko
- Indikationen: Versorgung von Hauttransplantaten und Entnahmestellen, traumatische Wunden, Verbrennungen bis Grad 2, post-operative Wunden, bei vorgeschädigter Haut, Hypospadie, in der plastischen Chirurgie und Palliativpflege

Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
5 x 7,5 cm	10 Stück	WIN5195710	52055 040	3856090
10 x 7,5 cm	10 Stück	WIN5197510	52055 041	3856109
10 x 10 cm	10 Stück	WIN5191010		
10 x 20 cm	10 Stück	WIN5181210	52055 042	3856115
20 x 30 cm	5 Stück	WIN5192305	52055 043	3856121

Versorgung chronischer Wunden

Schaumstoff-Wundauflagen



Askina® Foam
Saugstarke Schaumstoff-Wundauflage bei starker Exsudation

- Schnelle effektive Exudataufnahme
- Für Wunden mit mäßig bis starker Exsudation
- Optimaler Tragekomfort
- Kosteneffizient durch seltenere Verbandwechsel
- Visuelle Kontrollmöglichkeit der Exsudatabsorption
- Unter Kompression formstabil
- Keine Druckstellen unter Kompressionstherapie
- Indikationen: Dekubitus, Ulcus cruris, Diabetisches Fußulcus, traumatische Wunden, chirurgische Wunden

Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
5 x 5 cm	10 Stück	WIN7240510		
7,5 x 7,5 cm	10 Stück	WIN7240710	51411/106	3394407
10 x 10 cm	10 Stück	WIN7241010	51411/057	3394413
12,5 x 12,5 cm	10 Stück	WIN7241210		
15 x 15 cm	10 Stück	WIN7241510		
10 x 20 cm	10 Stück	WIN7242110	51411/058	3394436
15 x 20 cm	10 Stück	WIN7242510		
20 x 20 cm	10 Stück	WIN7242010	51411/059	3394442



Askina® Trachea
Saugstarke Schaumstoff-Wundauflage zur Versorgung von Trachealkanülen und anderen Drainagen bei starker Exsudation

- Exzellentes Transsudatmanagement
- Minimierung der Hautmazeration
- Atraumatischer, schmerzloser Verbandwechsel
- Sehr gute Passform für Drainagen
- Sehr hoher Tragekomfort
- Sehr gute Polsterungseigenschaften
- Kosteneffizient durch seltenere Verbandwechsel

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
	9,5 x 8,5 cm	10 Stück	WIN7248510	51435/012	18208646



Askina® Heel
Einzigartiger, anatomisch geformter Fersenverband aus saugfähigem Polyurethan-Schaum für gleichzeitigen Schutz des Innen- und Außenknöchels

- Anatomisch angepasste Form
- Exzellentes Exsudat-Management
- Druckentlastend
- Einfaches Anlegen und Entfernen
- Besserer Schutz der Wundränder vor Mazeration
- Längere Tragezeit und weniger Verbandwechsel
- Indikationen: Dekubitus, Diabetisches Fußulcus, chirurgische Wunden

Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
225 cm²	5 Stück	WIN7240105	51426/013	3155772

Einfaches Anlegen von Askina® Heel



1 Ziehen Sie die Folie der selbstklebenden Befestigungsstreifen ab und kleben Sie je einen Streifen auf Askina® Heel auf.



2 Legen Sie Askina® Heel vorsichtig im Fersenbereich an.



3 Befestigen Sie ein Ende der Schaumstofflasche auf dem selbstklebenden Befestigungsstreifen und ziehen Sie die Lasche auf die andere Fersen-seite. Die Lasche lässt sich mehrmals öffnen und verschließen, um sicherzustellen, dass die Wundauflage sicher und bequem sitzt.



4 Alternativ kann Askina® Heel mit einer TS Bandage fixiert werden.

Versorgung chronischer Wunden


Silberhaltige Verbände

Die häufigste Ursache für Wundinfektionen ist eine bakterielle Besiedelung. Da Infektionen den Heilungsverlauf negativ beeinflussen und eine höhere Morbidität und Mortalität zur Folge haben können, müssen diese schnellstmöglich beseitigt werden. Hierzu können innovative silberhaltige Produkte zum Einsatz kommen.

Askina® Calgitrol®

Internationale Leitlinien zur Anwendung von Silberverbänden¹

Im Allgemeinen sollten Silberverbände initial nur 2 Wochen lang verwendet werden (Best Practice Statement 2011).

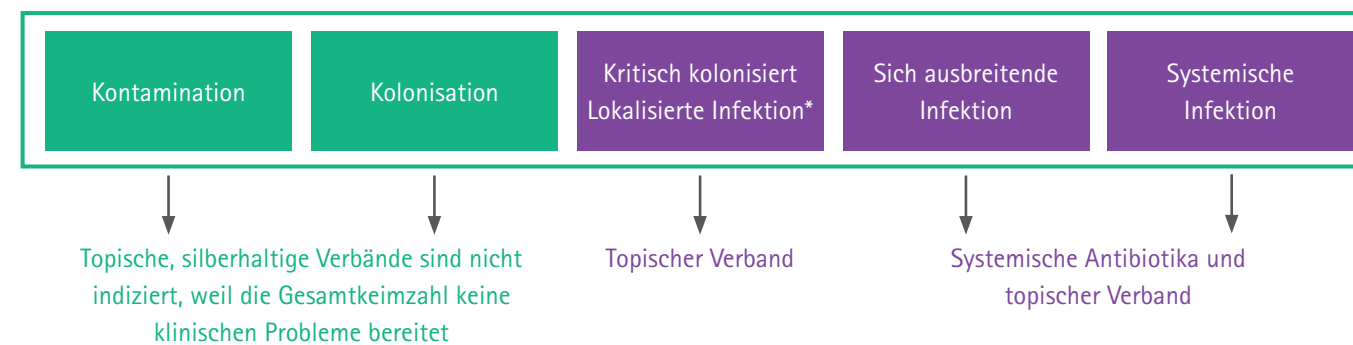

B. BRAUN PRODUKTEMPFEHLUNG ZUR VERRINGERUNG DER GESAMTKEIMZAHL



Bei jedem Verbandwechsel:

Prontosan® Wundspüllösung

- Durchbricht den Biofilm und reduziert die Keime
- Verfügt über ein breites Wirkspektrum (MRSA, VRE)²
- Langzeitanwendung

Prontosan® Wound Gel X Prontosan® Wound Gel


- In zwei Gel-Viskositäten erhältlich
- Löst stark verdickten Wundbelag
- Bleibt bis zum nächsten Verbandwechsel auf der Wunde und hat somit eine langanhaltende Wirkung

Askina® Calgitrol® Paste Askina® Calgitrol® Ag+

und systemische Antibiotika, wo indiziert




B. Braun erweitert nun sein Portfolio um Askina® Calgitrol® Ag+, eine Wundauflage mit einer Kombination aus antimikrobiell wirkendem Silber und verstärkenden Zellulosefasern für das Management von Wundinfektionen und stark exsudierenden Wunden.

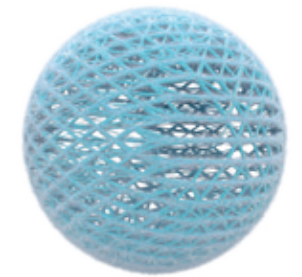

Carboxymethylcellulose (CMC) Gelierfaser



Stärkende Cellulosefaser

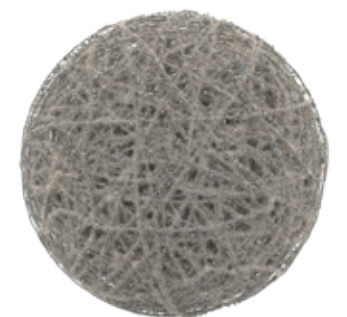

Cellulosefaser mit Silber-Nanopartikel

Vorteile

- Unterstützt die Wundheilung in einem feuchten Wundmilieu
- Hohe vertikale Absorption
- Geringes Schrumpfen
- Entfernung in einem Stück
- Breites antimikrobielles Spektrum
- Anhaltende Freisetzung von ionischem Silber
- Geringe Zytotoxizität
- Durchbricht und zerstört Biofilm

¹ Konsensdokument: Adäquate Anwendung von Silberverbänden bei Wunden (mit Anpassungen übernommen von: Lipsky & Hoey 2009; WUWHS Infn Doc 2008)

² Stolarck R, Minnich K, Olinger S, et al J clin Pharmacol 2010; 50(9): 1071

Versorgung chronischer Wunden

Silberhaltige Verbände



Askina® Calgitrol® Ag+
Silberhaltige Wundauflage

- Antimikrobiell wirksamer Silberverband
- Kombiniert mit verstärkenden Fasern
- Indikationen: Moderat bis stark exsudierende Wunden, chronische Wunden wie Ulcus cruris, Dekubitus und diabetischer Fußulcus, Operationswunden und Spenderareale, traumatische Wunden wie Abrasionen und Lacerationen, Verbrennungen bis Grad II

Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
5 x 5 cm	10 Stück	SFM6210510	51121/063	5945538
4 x 10 cm	10 Stück	SFM6210410	51121/067	5945573
10 x 10 cm	10 Stück	SFM6211010	51121/064	5945544
15 x 15 cm	10 Stück	SFM6211510	51121/065	5945550
20 x 30 cm	5 Stück	SFM6213005		
2 x 45 cm	5 Stück	SFM6214505	51121/066	5945567

Askina® Calgitrol® Paste

Das Silberalginat aus der Tube

Askina® Calgitrol® Paste ist eine homogene Silberalginat-Matrix, die sich eng an das Wundbett anpasst und dadurch „tote Räume“ verhindert, in denen sich Bakterien vermehren können.

Askina® Calgitrol® Paste ist steril in einer Tube mit einer langen Tülle verpackt. Diese erleichtert die Applikation der Silberalginat-Matrix in Tunnel, Fistelgänge und weiteren schwierigeren Wundformen.


Askina® Calgitrol® Paste enthält eine durchschnittliche Konzentration von 180 mg ionischem Silber pro 15 g-Tubenapplikation.

VORTEILE

- Passt sich sehr gut dem Wundbett an
- Vermeidet Kontamination durch externe Bakterien
- Ist sofort einsatzbereit und muss nicht befeuchtet/aktiviert werden
- Schafft ein ideal-feuchtes Wundmilieu
- Lässt sich einfach aus der Wunde entfernen, z. B. durch Spülen mit Prontosan®
- Ist erstattungsfähig

ANWENDUNGS-TIPP

- Tube vor dem Öffnen leicht durchkneten oder schütteln.
- Großzügige Schicht Askina® Calgitrol® Paste auf das gesamte Wundbett applizieren.
- Wunde mit einer geeigneten Wundauflage (z. B. Askina® Foam, Askina® DresSil Border) abdecken.
- Beim Verbandwechsel entfernen Sie Askina® Calgitrol® Paste einfach und schnell durch gründliche Wundspülung, z. B. mit Prontosan® Wundspüllösung.

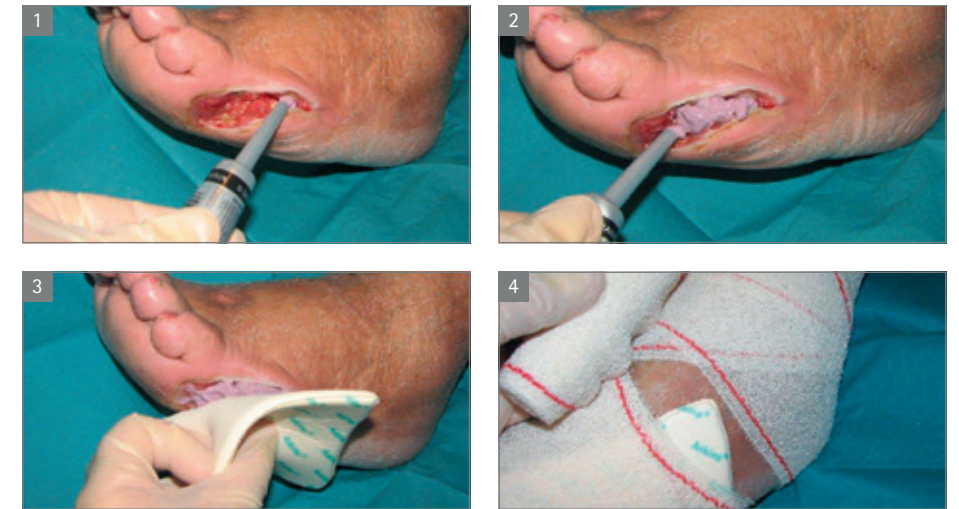

- Einzigartig: Silberalginat in einer flexiblen Tube mit langer Applikations-Tülle
- Hochflexibel schmiegt sich die homogene Silberalginat-Matrix in das Wundbett
- Passgenau werden auch die Bereiche erfasst, die bei flachen Silberalginat-Wundauflagen zur Entstehung von „toten Räumen“ und der Vermehrung von Bakterien führen



Askina® Calgitrol® Paste
Silber-Alginat aus der Tube

- Weiche und homogene Silberalginat Matrix
- Sehr gute Anpassungsfähigkeit an das Wundbett
- 100 % ionisches Silber
- Ist gebrauchsfertig und muss nicht erst durch Befeuchtung aktiviert werden
- Kontrollierte Silberionen-Abgabe
- Hält ein feuchtes Wundmilieu aufrecht
- Durch Spülen mit Prontosan® einfach aus der Wunde zu entfernen
- Indikationen: Diabetisches Fußulcus, Dekubitus (Grad 2 – 4), Ulcus cruris venosum und arteriosum, Verbrennungen bis Grad 2, Hautspendeareale, traumatische Wunden

Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
15 g	5 Stück	7211598		
15 g	10 Stück	7211599	51111/035	4146166

Versorgung chronischer Wunden

Alginate



Askina® Sorb Wundauflage
Hoch flexible und formstabile Alginat-Wundauflage mit Carboxymethylcellulose

Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
6 x 6 cm	10 Stück	WIN2115S	51110/050	3394376
10 x 10 cm	10 Stück	WIN2116S	51110/051	3394382
15 x 15 cm	10 Stück	WIN2102S	51110/052	3403767



Askina® Sorb Wundtamponade
Hoch flexible und formstabile Alginat-Wundtamponade mit Carboxymethylcellulose

Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
3 x 30 cm	10 Stück	WIN2105S		

Versorgung chronischer Wunden

Ergänzungssortiment



Das Askina®-Sortiment wird mit Aktivkohle-Wundauflagen zur Geruchsbindung sowie Produkten für den Haut- und Wundrandschutz abgerundet und stellt somit eine sinnvolle Ergänzung dar.

Askina® Carbosorb

Die effektive Kombination aus Superabsorber und Aktivkohle



TIPPS ZUR FIXIERUNG
Fixierung mit einer zirkulären
Fixier- oder Kompressionsbinde am
Unterschenkel bzw. Fuß

Eine randseitige Fixierung ist mit
Rollenplastern entsprechender Breite
möglich. Auf hautschonende Klebe-
reigenschaften ist zu achten

Fixierung mit einem flächigen Fixier-
vlies an Stellen, auf die Bewegung
und Scherkräfte einwirken

Die sterile, nichthaftende Wundkomresse Askina® Carbosorb ist im Inneren mit einem Aktivkohlefilter versehen, der sowohl Gerüche als auch Bakterien adsorbiert. Der Wundverband ist jetzt neu mit einer Superabsorber-Schicht versehen und geeignet für die Behandlung von wenig bis stark exsudierenden oberflächlichen bis tiefen Wunden, besonders wenn eine Infektion und/oder die Entwicklung unangenehmer Gerüche vorliegt. Die der Wundseite zugewandte weiche, sehr feste Schicht aus Viskose-, Polyamid- und Polyestergerewebe besitzt eine hohe Saugfähigkeit.



Askina® Carbosorb
Superabsorbierende Wundauflage mit Aktivkohlefilter

- Hohe Saugfähigkeit
- Für wenig bis stark exsudierende Wunden sowie für oberflächliche bis tiefe Wunden
- Bei Vorliegen einer Infektion
- Bei der Entwicklung unangenehmer Gerüche
- Bindet im Wundareal freigesetzte Toxine
- Indikationen: Ulcus cruris venosum, fäkale Fisteln, infizierte und/oder unangenehm riechende chirurgische oder traumatische Wunden, als Sekundärverband, besonders bei sehr unangenehm riechenden Wunden, wenn kein Folienverband verwendet werden kann

Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
10 x 10 cm	10 Stück	WIN9025006	52073/011	1777334
10 x 20 cm	10 Stück	WIN9025014	52073/015	1777357
20 x 20 cm	10 Stück	WIN9025015		



Askina® Derm Lite
Semipermeabler Transparent-Wundverband aus Polyurethan zur Kanülen- und Katheterfixation und zur Wundversorgung

Abmessung	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
6 x 7 cm	10 Stück	WINF72032		
6 x 7 cm	100 Stück	F72033		
10 x 12 cm	5 Stück	WINF72034		
10 x 12 cm	10 Stück	WINF72035	51201 019	1777392
10 x 12 cm	50 Stück	F72036		
15 x 20 cm	10 Stück	WINF72038		



Askina® Barrier Film
Schnell trocknender, atmungsaktiver Hautschutz für die Pflege in der Stoma-, Inkontinenz- und Wundversorgung

- Transparent und alkoholfrei
- Trocknet in nur 30 Sekunden
- Effektiver Hautschutz vor aggressiven Körperausscheidungen, Klebstoffen und Reibung
- Hilft vorzubeugen, zu schützen und zu erhalten
- Alkoholfrei, transparent, sauerstoff- und feuchtigkeitsschützend
- Wirksam bis zu 72 Stunden
- Indikationen: Vorbeugung gegen Hautschädigung durch Reibung oder Feuchtigkeit, Schutz der Haut vor Mazeration

Ausführung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	PZN
Pumpspray	28 ml	1 Stück	5036	4062802



Askina® Barrier Cream
Nicht rückfettende Hautschutzcreme. Wirkt bis zu 72 Stunden.
Auch unter Haftverbänden oder Stomaversorgungen anwendbar.

- Nicht rückfettende Hautschutzcreme
- Wirkt bis zu 72 Stunden
- Auch unter Haftverbänden und Stomaversorgungen anwendbar
- Bildet einen atmungsaktiven, transparenten Schutzfilm
- Schützt intakte und gereizte Haut bis zu 72 Stunden vor Ausscheidungen und Wundsekreten.
- Spendet Feuchtigkeit
- Äußerst sparsam im Verbrauch
- Brennt nicht auf der Haut
- Indikationen: Hautschutz bei Urin- oder Stuhlinkontinenz und vor aggressiven Körperflüssigkeiten, Prophylaxe gegen Hautreizungen, die durch Kleber oder Verbände verursacht werden

Ausführung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	Tarif Nr.	PZN
Tube	92 gr	1 Stück	5038		4075667



Askina® Barrier Swabs
Schnell trocknender, atmungsaktiver Hautschutz für die Pflege in der Stoma-, Inkontinenz- und Wundversorgung in Lolly-Form

- Transparent und alkoholfrei
- Trocknet in nur 30 Sekunden
- Effektiver Hautschutz vor aggressiven Körperausscheidungen, Klebstoffen und Reibung
- Hilft vorzubeugen, zu schützen und zu erhalten
- Alkoholfrei, transparent, sauerstoff- und feuchtigkeitsthroughlässig
- Wirksam bis zu 72 Stunden
- Indikationen: Vorbeugung gegen Hautschädigungen durch Reibung oder Feuchtigkeit, Schutz der Haut vor Mazeration

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
	1 ml	25 Stück	5037	



Askina® Skin Freeze
Kryotherapeutisches Mittel bestehend aus Kryospray mit spezieller Applikationstechnik sowie Applikatoren

- Mit spezieller vorteilhafter Askina-Technik
- Mit dem Stick ruhiges und gezieltes Arbeiten
- Kein versehentliches Nachsprühen mit Verätzungsgefahr möglich
- Therapieerfolg ohne apparative Investitionen
- Hohe Patientenzufriedenheit – unblutig und schmerzarm

Ausführung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	PZN
150 ml Dose mit 50 Applikatoren	Standard 5 mm	1 Set	9380703	3605465
150 ml Dose mit 60 Applikatoren	Small 2 mm	1 Set	9380702	

Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bitte allgemeine Sicherheitsvorkehrungen beachten. Bei Massenfertigungsprodukten können Funktionsabweichungen gemäß derzeitigem Stand der Technik nicht vollständig ausgeschlossen werden. Liefer- und Versandbedingungen richten sich nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.bbraun.at. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

B. Braun Austria GmbH | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf | Österreich

Tel. +43 2236 46541-0 | kundenservice.at@bbraun.com | www.bbraun.at

 www.facebook.com/bbraunat  www.bbraun.info/youtube

 www.instagram.com/bbraun_at  www.bbraun.info/in

Nr. 4003000 Stand: 02/2025
Druck: druck.at, Leobersdorf